

Airtraq Avant

VIDEO LARYNGOSCOOP

V5 Otrougebruiksaanwijzing nummer 6,843,769

OPTIEK

GEBRUUKSAANWIJZING

(NEDERLANDS)

BESCHRIJVING

De Airtraq Avant is een video laryngoscoop om tracheale intubaties te vergemakkelijken en maakt een volledige visualisatie van de luchtweg mogelijk gedurende de gehele intubatieprocedure. Voor de AIRTRAQ AVANT is het niet noodzakelijk dat de nek in hyperextensie wordt gebracht en is het mogelijk de patiënten in vrijwel elke positie te intuberen. Beeld kan verkregen worden direct via de oogschelp of door aan een willekeurige Endo-camera of aan de door de fabrikant bijgeleverde toebehoren te koppelen.

COMPONENTEN

Airtraq Avant bestaat uit 3 elementen die door de gebruiker voor elke intubatie samengesteld dient te worden:

De Optics: Een **HERBRUIKBAAR** onderdeel dat bestaat uit de Optics, de anti-condens en het elektronisch systeem dat zich buigt naar de vorm van het blad; Het optisch element werk alleen wanneer deze volledig in het blad is ingebrecht.

Een cover wordt bij elke Optics bijgeleverd. Het beschermt de Optics wanneer deze niet wordt gebruikt.



Het blad: Plastic en volledig **DISPOSABLE**, anatomisch gevormd, dat bestaat uit twee kanalen. Een kanaal dat dient om de Optics in te plaatsen, het andere kanaal (open aan het distale uiteinde) functioneert als geleider voor de endotracheale tube.



De oogkap: Een **WEGWERPEEL** dat is bevestigd aan de bovenzijde van het blad en is aan te sluiten aan de meeste Endo-camera's.



Het Airtraq Avant systeem bestaat uit een oplaadstation voor het opladen van de Optics-batterij en dat op de display de overgebleven gebruiksduur toont. In het geval de Optics beschadigd raakt, zal het LCD-scherm een error code geven. Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing voor het oplaadstation wordt in de verpakking bijgeleverd. Het oplaadstation heeft geen service nodig.

OPTIEK LEVENSDUUR EN HOUDBAARHEID

De levensduur van de Airtraq Avant Optics is gedefinieerd door de producent door middel van het aantal gebruiken dat de Optics nog gebruikt kan worden. Dit is gelijk aan 100 keer. Wanneer de levensduur van de Optics is beëindigd dient deze te worden weggegooid door de gebruiker.

De levensduur start wanneer de Optics voor de eerste keer gebruikt wordt. Elke keer dat de Optics aan wordt gezet en de lens is opgewarmd telt dit als een enkel gebruik.

Het aantal overgebleven gebruiksmodi-

ikheden staat in de display van het oplaadstation wanneer de Optics opgaat. De Optics bevat ook een licht indicator die informatie geeft over de beschikbare levensduur.

- Een stabiel groen licht betekent dat de Optics nog van 11 tot 100 keer gebruikt kan worden.

- Een knipperend groen licht betekent dat de Optics nog van 6 tot 10 keer gebruikt kan worden.

- Een stabiel geel licht betekent dat de Optics nog van 1 tot 5 keer gebruikt kan worden.

- Een knipperend geel licht betekent dat de Optics einde levensduur is.

De bladen en oogkap hebben een gelimiteerde levensduur aangegeven door een uiterste vervaldatum.

GEbruik, Opslag en Transport

De Optics dient niet te worden gebruikt, bevordert of gesensitiseerd bij temperaturen onder -5°C/23°F of hoger dan 55°C/131°F. De relatieve luchtvochtigheid mag niet boven 95 % komen. Luchtduur mag niet lager zijn dan 500 of hoger zijn dan 1060 hPa.

Om de Optics te beschermen wanneer deze niet wordt gebruikt, moet ze in de cover worden geplaatst.

BATTERIJ EIGENSCHAPPEN

Elke Optics is uitgerust met een oplaadbare batterij met een spanning van 3,7 volt voor het LED-licht en het anti-condenssysteem.

De batterij is reeds aanwezig bij de Optics. Enkel de plastic beschermfolie moet worden verwijderd.

DE OPTICS WERKT NIET TIJDENS HET OPLADEN. LAAD ENKEL BIJ EEN MINIMALE AFSTAND VAN 1.8M TOT DE PATIENT.

De batterij wordt leeg aangeleverd. Het is aanbevelen om een volledige lading- en ontladingscyclus te doen alvorens de Optics klinisch in te zetten.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen heeft deze een gebruiksduur van ongeveer 15 keer. De fabrikant raadt aan om de Optics na elke intubatie op te laden in het oplaadstation. Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 2 uur. Een volledig opgeladen batterij heeft een ontladingsduur, zonder gebruik, van langer dan 30 dagen.

Wanneer de Optics in het oplaadstation is geplaatst wordt de batterij-status weergegeven. De Optics bevat ook een lichtindicator om aan te geven wat de batterijstatus is.

- Een stabiel groen licht betekent dat de Optics nog tussen 40 en 120 minuten kan worden gebruikt.

- Een knipperend groen licht betekent dat de Optics nog tussen 20 en 40 minuten kan worden gebruikt.

- Een stabiel geel licht betekent dat de Optics nog tussen 10 en 20 minuten kan worden gebruikt.

- Een knipperend geel licht betekent dat de Optics minder dan 10 minuten kan worden gebruikt en dat bijgevolg niet ingeschakeld worden.

Om het ontladen van de batterij te voorkomen schakelt de Optics automatisch uit wanneer deze in het Avant blad zit voor meer dan 30 minuten. Drie minuten voor het uitschakelen, zal het lampje elke 10 seconden knipperen.

CHECKEN VAN DE BATTERIJ EN LEVENSDUUR

De gebruiker kan de batterij testen door de CHECK toets te drukken op het batterijplaatje of door de Optics in het oplaadstation te plaatsen.



BLAD AFMETINGEN

Standaard: A-511. Maat 3
Voor gebruik bij ETT 7.0 - 8.5. Minimale opening van de mond van de patiënt: 17 mm.

Klein: A-521. Maat 2
Voor gebruik bij ETT 6.0 - 7.5. Minimale opening van de mond van de patiënt: 17 mm.

INTUBATIECHNIJK MET DE AIRTRAQ AVANT

I. PLAATSEN VAN DE OPTICS, BLAD EN OOGKAP

- Check de levensduur van de Optics middels de Check toets of door deze in het laadstation te plaatsen.

- Selecteer de juiste maat gebaseerd op de maat ETT die gebruikt gaat worden.

- Plooi het buigbare gedeelte iets rechter en richt de oriëntatie indicatoren op de Optics met het Avant blad.

- Plaats de Optics volledig in het blad totdat er een duidelijke 'klik' is te horen.



- Monteer de oogkap op het proximale deel van het Optics.



- Of plaats de camera over het proximale gedeelte van de Optics.



- Voor het inbrengen in het blad e zal de lichtbron beginnen te knipperen voor een periode van ca. 25 seconden, totdat het anti-condens de lens heeft opgewarmd. Wanneer het apparaat klaar is voor gebruik zal de lichtbron niet meer knipperen.

II. VOORBEREIDING

- Voorzie de ETT van glijmiddel en plaats deze in het zijkanaal van het blad, zonder de lens aan te raken.

- Zet de punt van de ETT op één lijn met het einde van het zijkanaal.

III. AIRTRAQ AVANT PLAASTING IN DE LUCHTWEG (Fig. 1)

- Introduceer de Airtraq Avant in de middenlijn van de mond van de patiënt. Let er in het bijzonder op dat de tong niet in de pharynx gedrukt wordt.

- Bekijk de structuur van de luchtwegen alvorens de Airtraq Avant in de verticale positie wordt gebracht.

- Laat het blad verder zakken totdat de epiglottis zichtbaar is en plaats de punt van het blad in de vallecula.

- Als alternatief kan de punt van het blad onder de epiglottis geplaatst worden.

- Maak een lichte verticale naar boven gericht beweging om de stembanden in beeld te krijgen.

IV. ETT INSERTIE EN AIRTRAQ AVANT VERWIJDERING UIT DE LUCHTWEG (Fig. 2 en 3)

- **How de stembanden centraal in het gezichtsveld door middel van lichte bewegingen met de punt van het blad.**

- Breng de ETT voorzichtig in en indien nodig, draai de ETT. Controleer hoe diep de ETT is ingebrecht.

- Blaas de cuff van de ETT op en verbind

de ETT aan de beademingsmachine; controleer de plaatsing.

- Scheid de ETT van de Airtraq Avant door deze naar de zijkant te bewegen, terwijl de ETT op zijn plaats wordt gehouden.

- Verwijder het blad uit de luchtweg van de patiënt door het blad er centraal uit te nemen.

V. AIRTRAQ AVANT WEGGOOIEN

- Verwijder de Airtraq Avant Optics van het blad door stevig de beide laterale zijkanalen van de oogkap vast te pakken en deze los te trekken. Let op dat de Optics niet in aanraking komt met potentieel gecontamineerde oppervlakken.

- De lichtbron schakelt automatisch uit wanneer het uit het blad wordt genomen.



- Weggooi van het wegwerpbld en de oogkap moet op dezelfde manier als elk ander potentieel gecontamineerd afval gebeuren. Gooi het blad en de oogkap weg. Volg hiervoor de geldende afval- en recyclingregels.

- Wanneer nodig plaats de Optics terug in de oplaadstation om de batterij op te laden.

AANBEVELINGEN BIJ HET GEBRUIK

1. Doe ervaring op bij luchtwegen die geen probleem vormen.

2. Breng de Airtraq Avant in en vermijd het aanraken van de tong; introduceer de Airtraq Avant voorzichtig.

3. Houd de Airtraq Avant in de middenlijn van de mond.

4. Kijk alvorens de Airtraq Avant in de verticale positie staat.

5. Breng niet te diep in. Indien de structuren (larynx, trachea, enz.) niet herkend worden, de Airtraq Avant onmiddellijk terugtrekken.

6. Zadr de punt van de Airtraq Avant zich in de epiglottis bevindt, dan wel in de vallecula (volgens McIntosh), dan wel onder de epiglottis (volgens Miller), maak dan een lichte verticale naar boven gericht beweging (niet op en neer bewegen).

7. Breng de ETT voorzichtig in en indien nodig, draai de ETT.

MR VOORWAARDEN

Niet-klinische testen hebben uitgewezen dat Airtraq Avant onder voorwaarden binnen de MRI omgeving kan worden gebruikt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

- Statisch magnetisch veld van 3 Tesla of minder

- Ruimtelijke gradiënt magnetisch veld van 720 Gauss/cm of minder

BELANGRIJK: Airtraq Avant mag dan bruikbaar zijn binnen een MR-omgeving, hij zou echter niet direct binnen het MRI-systeem moeten worden gebruikt, terwijl de Airtraq Avant operatief is. Als dusdanig mogen enkel de interacties in overweging worden genomen bij een blootstelling aan een 3 Tesla MR-systeem.

WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

- Dit product mag uitsluitend en alleen door personeel gebruikt worden dat getraind is in het plaatsen van endotracheale tubes.

- Er mag met dit product geen druk op de tanden worden uitgeoefend.

- Het introduceren van de Airtraq Avant in de bovenste luchtweg mag niet getoetst worden.

- Dit product mag niet verbrand worden indien de batterijen niet zijn verwijderd.

- Dit product mag niet in vloeistof ondergedompeld worden.

- Dit product mag uitsluitend met niet-brandbare vloeistoffen gebruikt worden.

- Raak het LED-scherm van de Optiek niet aan.

OPTIEK SCHOONMAKEN EN DESINFECTIËN

De Optics kan in het blad geplaatst en verwijderd worden zonder deze aan te raken.

De Optics moet nooit in aanraking komen met de patiënt. Daarom is het geclassificeerd als een 'non-critical device'.

In het geval dat de Optics gecontamineerd wordt raden wij aan om deze schoon te maken met een desinfectiemiddel. Zorg ervoor dat uw instelling de specifieke reinigingsprocedures in overleg volgt met deze handleiding.

1. Verwijder de Optics uit het blad.

2. Schoonmaken: gebruik schone katoenen gaas, waar desinfectiemiddel op zit, om de externe oppervlakte van de Optics schoon te maken. Gebruik zachte borstels met het desinfectiemiddel op de plaatsen waar de gazen niet kunnen komen. De volgende schoonmaakmiddelen kunnen gebruikt worden:

- a. Enzymatische schoonmaakmiddel (bijv.: ENZOL™ enzymatisch reinigingsmiddel)

- b. Neutrale pH zeep en water.

- c. Natriumcarbonaatoplossing (8 - 10%).

3. De volgende desinfectiemiddelen kunnen gebruikt worden:

- a. Perazijnzuur oplossing (0,08%).

- b. Isopropylalcohol (70%).

- c. Isopropylalcohol (70%) isopropyl alcohol en 2% chlorhexidine (bijv. Cinell wipe).

- d. Oplossing bevattende chloordioxide (bijv. Tristel wipe).

- e. PDI Sani-Cloth® desinfecterende doekjes (AF3, Bleach, Plus of Super Sani-Cloth®).

4. Dep de Optics droog gebruikmakend van een steriele chirurgische handdoek.

5. Let op:

- Gebruik geen autoclaf.
- Niet onder stromend water.
- Niet waken in vloeistoffen.
- Vermijd vloeistof of vocht in de Optics.
- Vermijd contact met de lens van de Optics.

OPTIEK-WEGGOOI INSTRUCTIES:

Wanneer de levensduur van de Optics is afgelopen moet deze op de volgende manier worden weggegooid:

- Verwijder de afdekplaat van het batterijcompartiment door deze opzij te duwen (vingers in de inkepingen).

- Verwijder de batterijen van de Airtraq Avant en gooi deze in een daarvoor bestemde afvalbak. De batterijen zijn geclassificeerd als zijnde niet gevaarlijk afvalmateriaal en voldoen aan de European Directive WEEE.

Volg hiervoor de geldende afval- en recyclingregels.

GARANTIE VAN DE FABRIKANT

De fabrikant biedt garantie op de Airtraq Avant Optics voor al het materiaal of fabricagefouten gedurende de volledige levensduur van het systeem en voor een periode van 2 jaar na aankoopdatum bij alle gebreken die zich daarvoor voordoen, mits Airtraq Avant volgens de voorschriften wordt gebruikt.

Deze garantie is alleen van toepassing indien het product bij een erkende verdeler is aangeschaft.

Het AIRTRAQ AVANT BLAD EN OOGKAP zijn ontworpen voor eenmalig gebruik.

Waarschuwing! Schoonmaken en



Gebruik van het AIRTRAQ AVANT BLAD kan een negatieve beïnvloeding hebben op de patiëntveiligheid.

Gebruik van de Airtraq Avant Bladen die schoongemaakt of gesteriliseerd zijn na eerder gebruik, kunnen serieuze gevolgen hebben in de productiegarantie en hierdoor vervalt de Airtraq Avant garantie. De fabrikant wijst in dit geval alle andere garanties industrieel de geschiktheid voor bepaald gebruik, zonder limiet af.

Vervaardigd door:


PRODOT MEDITEC LIMITED
No. 18, 7th Science Ave.
Hi-Tec Coast, Zhuhai, Guangdong
519085 P.R. China

EU-vertegenwoordiger:
PRODOT MEDITEC S.A.
Muelle Tomás Olaverri 5, 3º
48930 Las Arenas SPAIN

Surf voor meer informatie over het gebruik van Airtraq Avant naar:

www.airtraq.com of neem contact met ons op: info@airtraq.com

AIRTRAQ is een wetig gedeponeerd handelsmerk.

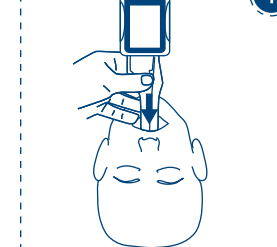


Via middellijn inschuiven

- Niet te diep inbrengen
- Voorzichtig omhoog tillen

- Airtraq draaien om stembanden te centreren

- ETB roteren

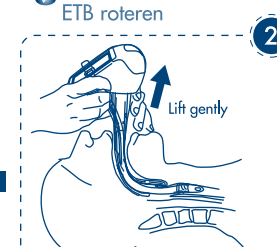


Glofiscenreren

ETB naar voren brengen



Via middellijn verwijderen

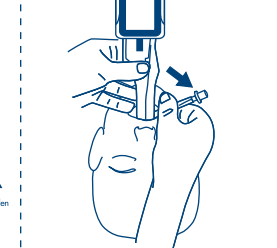

Via middellijn verwijderen